

Dëne dzıdıdhé ha Breezhaler® hulyé



RESPTREC®



Bekahárl'á



Bedaharúta, tanısi nuúta hu (klik dıtt'h'agh hots'én bedarúta)




Baneht'u bekuúni hu berúni la kudáne



Hawujı la



Naidié hujı ?édets'én, hıtó hu hawujı la

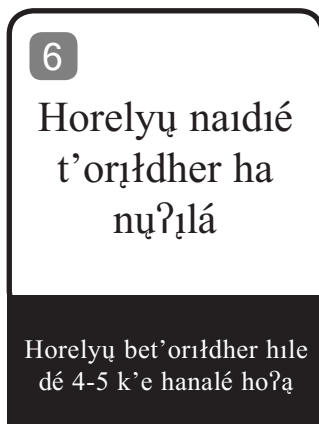

6 Horelyu naidié t'orıúdhher ha nuúıla

Horelyu bet'orıúdhher hıle dé 4-5 k'e hanalé ho?a



Bedarúti hu nela k'enóltsıl

?édıat'u ?édırı Breezhaler®? Bet'ore?á ?á

1. Cap narúta la.
2. Ku t'a dënedhá ha nets'én dedhen hawulé la. Ku t'a naidie k'e tanısi nuúta la. Ku t'a ?édırı naidié k'ı bedarúta la "klik dıtt'h'agh ts'én".
3. Breezhaler® yudaghe ts'én hıtó la bek'ıni baneht'u bek'elni k'e ?ıá hots'én hu benarúni lá.
4. ?eyer dé hawujı la beyenéjı ch'ası
5. ku beyets'éjı nédhá k'e nuúta hu beye hujı la ıgha chu ?éık'eraká (narekoth ladahot'ı hası t'a dıtt'h'agh hadé). Ku ?eyer dé hujıhıle wale 5-10 seconds hots'én. Hawujı la ?eyı t'ághé dé.
6. ?édırı naké hultá hanáwulé 4-5.
7. ku t'a naidié tilé ?qlhál la. Breezhaler® bedarúti hu. Nela k'enóltsıl la.


Ku t'at'u Breezhaler® bóghıni

1. T'ok'e dënedhá beyé néjı k'ı yu ?á bek'enóldé la.
2. Nests'ı Breezhaler® bek'enaıtsıl ho?ahıle.



RESPTREC™

Diskus® hulyé naıdıé

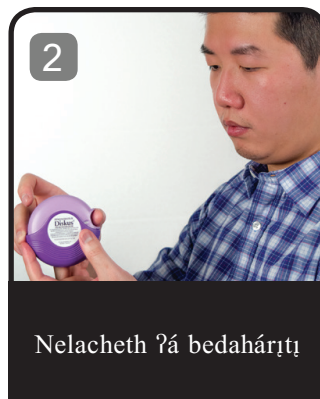

Ku ředřat'ú ředııı Diskus® bet'oreřá řá?

1. Bedarıtı.
2. Bedaháıřı: hořask'áthé hots'ı hıtó neláchetř řá bek'ęhıřı la t'ok'e dęneláchetř řá bek'ılıřı hořa k'é. Neláchetř řá hotıé bekuřı la t'ats'ęn klık dıřth'agh hots'ęn.
3. ku řeyer dé řařı nóřsus la t'ats'ęn klık dıřth'agh hots'ęn.
4. Nets'ı Diskus® hıtó la řeyer dé hawujı la nech'ası hots'ęn
5. ku nedhá k'é ředııı naıdıé bek'é neřı k'e nıřı la, hotıé deghare hots'ęn huıı chu hawujı la. Ku řeyer dé Diskus® ředech'ase nıřı la. 10 seconds hots'ęn neıı hıtó la, ts'ethııę hawujı la.
6. Bedarıtı: nelacheth řá t'anıřthá hots'ęn bekuřı la.

Ku t'at'u Diskus® bogıřı

1. T'ok'e beye neřı bek'enóřdé la yu hıtó tsatsılé řá.
2. T'ok'é horeıı k'é bek'ıřı la, t'ok'e yısı horelts'elı hılé sı i.e. tsákuę hılé.
3. Diskus® k'ı 'toho bet'orıřıřı řá hılé bedarıtı hořa; t'oho bet'orıřıřı hadé bedaharıřsus ha řesot'ehılé sı.
4. Diskus® naıdıé k'ı hok'ath ch'ası tth'ı bek'onı hřa, hodhelé chu sa hodhele chu hodhele (30°C hodhelé hulta).
5. Ku t'anelt'e naıdıé huıı hulta hok'etř'a nıřıřı la. Dęlk'os hané ha t'oho 5 naıdıe bet'orıřıřıřı ghı nıřıřıřı dé ředııı beye neřı hots'ı naıdıé tılı yé.

Ellipta™ naıdıé hulyé




?édłat'u ?édırı Ellipta™ bet'orıl?á ?á?

1. Bedarıta.
2. T'a beyé nejí ha bedaharıtı. Nısı ts'én naıłsus t'a beyé nejí ha. ?eyer dé “klik” dıttth'agh ha.
3. T'ok'e beye ts'éjí ch'ası hujı la.
4. ku t'a beyé nejí ha nedhá gesı nıtı la, ?eyer dé hıłt'ui k'esı nedhá hawılé lá. Beyé nejí thá hots'én, ?éłkıııı, chu hotié degharé hujı la (ku t'ok'e nıłts'ı beyé dhı sı nela bek'e nı?á sonı).
5. Ku ?enáıt'e t'ághhe dé nedhá ch'ası nıtı nıyı hıtó heł 5-10 ts'én norıł?ıh la neba horená hılé dé. ?eyer dé hajıı.
6. dēnedhá k'é. nedhe k'onółtsıł lá.

Ku t'at'u nets'ı Ellipta™ boghıııı ho?á

1. ?édırı Ellipta™ k'ı tsátsıne tılı ye neghá nıt'á sı. Ku t'oho bet'orıłdhı hadé, bedaharıtch'ul t'a naıdı tılı k'ı.
2. Tılı ye ?ası hııı sı beye tu hané ch'a. ?édırı ?asıe ?áłghes ho?á.
3. BEK'E DUT'IS LA “T'oho bedaharelch'el hu” and “?áłghes” dzıne naıdıé tılıé K'É. Ku t'oho “?áłghes” dzıne k'ı 6 DZIRÁTÁ ho?á t'oho bedáharēlch'el hots'ı.
4. Ku t'ok'é dēnedhá naıdıtılı herıdı k'ı bek'e nıłdé la bet'orıłdher t'ághhe dé, ku bek'e denezé dé tsátsılé t'orıłdhı la bek'e naıłdé ha. Kulı hokét'á bek'e náldé hılé kulı ?ēsot'ehılé sı.
5. Ku nets'ı naıdıé k'ajēne 10 beghodher dé naıdıtılı ye, t'a hultá sesk'athé ts'én DĒLK'OS borıt'ı ha. Bet'á benaııııı ha, naıdı godhe ha. Ku t'anáde bet'orıłther dé, hulta k'e “0” boreıt'ı hel beye dodı hası. Naıdıé tılı ?áıłhal ho?á.

Genuair® naidie hulyé

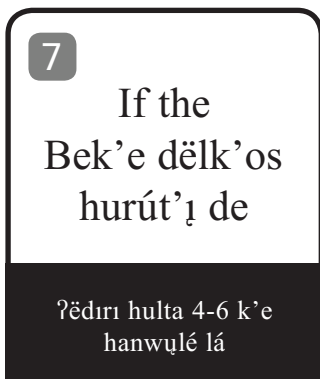

Ku ?èd'at'u sets'í Genuair® bet'orí?á ha?

1. Bedahárutá (ts'ethiyé k'a k'e hıchú la)
2. Ku t'a t'achai lahot'í bek'úhni ?í?á hut'a hu berunı.
3. Ku t'a begharé boghedı sı, nu?h la t'achai lahot'í ha. T'achai lahot'ı de nezı sı.
4. T'ok'e beye ne?ı ho?á ch'ası hujı la.
5. Neda naıdı tılı k'e nu?á. Hotie natser chu deghare hujı la. Ku ?a?ı hujı la naıdı tılı k'eyaghe ts'én “klik” dethıth'agh kulı. 5-10 seconds hots'én neyı hutó la. Hawujı.
6. Ku t'a begharé hoghedı nanúl?ıh la, dèlk'os horút'ı hots'én.
7. ku ?a?ı dèlk'os horút'ı hılé dé 4-6 hots'én k'e hanáwulé la.
8. Bedánaru?á.

?èdiri nu?h la: ku t'a begharé hulta k'e dèlk'os horút'ı dé k'as?ené belá?he sı. Nets'ı naıdıé Genuair® t?hını hı?á ha ?eyer dé.

T'at'u nets'ı Genuair® boghı?ı

1. Yu deyai hutó tsatsılı ?á bek'nó?é.

Handihaler® naidíe hulyé

Page 1 of 2



Bedaháruṭa



Dēnedhá k'é bedaharuṭa



Tānísí naidíe
Nuḷṭa



bedanaruṭa
(klik)



Ḳíḷa bek'úṭnī
Berunī



Hawují

HandiHaler® bet'or'ṭa

Ḳēḷts'eneruḷé t'ok'e naidí hulyé ye. Tānísí bek'úṭch'ul. Ku Ḳeyer dé bek'enanuḷchuth, Ḳíḷaghe naidí tili boreṭ'í ha. Naruḷṭa hu naidí tili hoḷṭa. Ḳēdirí benoḷnī la: naidí tili tu chu saḷ'así be nezulé sī.

1. Yudaghé ts'ēn huṇíḷt'í dé bedahareṭí ha.
2. dēnedhá k'e yudá huṇíḷt'í dé bedahareṭí ha.
3. Ḳíḷaghe naidíe tili t'ok'e beyéṭí k'í beyuṭa la.
4. Ku t'ok'e nedhá beye neḷí ha bedaruṭa t'ats'ēn klik dīṭth'agh hots'ēn, bek'ekāne daruṭa soná.
5. Ḳēdirí naidíe HandiHaler® huṭó la t'a dēnedha ha hoḷṭa yudaredhēn hu Ḳíḷa bek'úṭnī bedaharígé ha.
6. dēnedha k'e ch'así huḷí la.

T'at'u nets'í HandiHaler® boghíṭnī

1. Ku Ḳēdirí HandiHaler naidí tili k'í Ḳíḷaghe sa bek'e naldé hoḷṭa.
2. Dēnedha k'e nīharíṭí hu. Ku t'ok'e benígé k'é tth'í bedaharíṭí hú.
3. Nets'í HandiHaler® bek'enóḷtsíḷ tunedhél Ḳá. t'a naidíe hulyé sī naríḷdé ha datḷagh hendí.
4. Ku nets'í HandiHaler® naríshá hadé, bek'aikāne chu dēnedha k'e bedaruḷa hílé.


Handihaler® naidíé hulyé

Page 2 of 2



7

Ts'ethiyé hují tha
hots'én. Norúlh. Hawújí

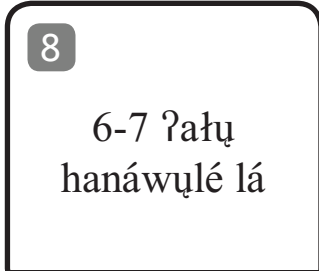

8


6-7 ?ału
hanáwulé lá

Nah naidie nejí ha



9

Bedaharúta. Naidí tılı
?ółhal. Bedanarúta
HandiHaler®

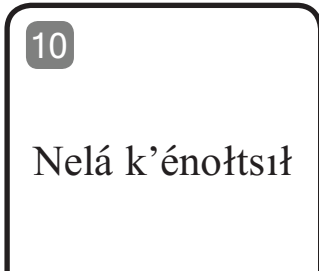

10

Nelá k'énołtsıł

HandiHaler® bet'or?a (continued)

7. Nedhá t'ok'e dënedhá k'e nų?á. ts'éthiyé ?ıghahıle chu nedzıdıdhe k'etł'a hují.
Ku ?ëdırı naidie HandiHaler® nedhá ch'ası
dınúta ?eyer dé 10 ts'én hųłta la.
8. ?ału 6-7 hulta k'e nóthujá nahts'én neyí nejí ha.
9. Ku t'ok'e dënedhá k'e bedaharúta naidí tılı
?ółhal. Bałt'u dënedha k'e chu bedaitanı
darúla.
10. Nela k'énołtsıł



Metered-Dose Inhaler naidí hulta hulyé



Bedaharí?á



Hųłhıs hu




Naijı



?ädēhıı hu ?ııa yunı
bek'ıını
Ts'ethıye nejı



Nehıhılé.
Ts'ethıye hanéjı

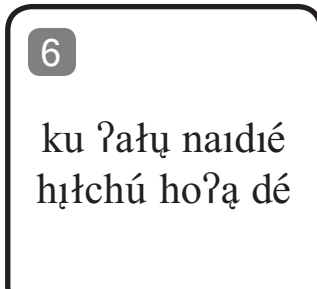

ku ?aııı naıdıé
hııchú ho?á dé

30 seconds ts'ęn
norųıh 2-5
k'e nothujá



Bedánarıtı hu tu ?a nedhá
huthųłhus

Ku ?ädłat'u sets'ı naıdı Metered-Dose Inhaler (MDI) bet'orıı?á ?á?

1. bek'aıkáné narųtı naıdı tılı hots'ı.
2. Hųłghus.
3. Nets'ı naıdı tılı ch'ası ghųjı.
4. ku dēnedha k'e naıdı tılı k'e ghų?áıl la neghú gasé. Ts'ethıye neł nejı ?eyer dé ?ııa bek'ųını bek'edaghé. ?aııı nejı ho?á naıdıé heł t'ats'ęn belaghe hajı hots'ęn.
5. neyı hųtq 5-10 seconds hots'ęn, hojı ts'ethıye.
6. Ku ?aııı naıdıé ?anét'ı ha nets'édı dé, 30 seconds hots'ęn norųıh naııchú ha, ?eyer dé 2-5 hultá k'e nóthujá la t'anełt'e hııchú hots'ęn.
7. bedánarıtá hu nedhá ye tu hųłhıs.

bebólnı: ku nets'ı naıdı tılı ?ası begasé nııı bedı ha dué sı beł ho?á.

benólnı: hok'etł'a t'a ?erııht'ıs begharé nets'ı naıdeı ?anét'ı ha bek'eyoıtı ?ejá MDI t'at'u bet'anełt'ı daııı ha.

Nets'ı MDI bóghıını

1. Dzıratá danełt'u ?ııá, naıdıtıı t'ok'é beye thetá k'ı nahrıtá la ?eyer dé tu nedhél, datłagh tué ye bek'enołtsııı la. Tthęne naréjá hanelé. Ku deyaıı hajá dé, naıdı tılı beyé nųłtı. Dēnedha k'e k'aıkáné nųtá lá.
2. Bek'e ho?á sı bedárųdhı walé sqa.

Metered-Dose Inhaler naıdı hulta hulyé Spacer Device heł



Narıʔá



Hıłhıs




spacer cap narıta. Ku ʔeja naıdıtı nıta spacer gá



Nejı hu bek'ıhı ʔııá hu ʔenıt'é Ts'ethıye nejı



Neyı hıtó. Haijı

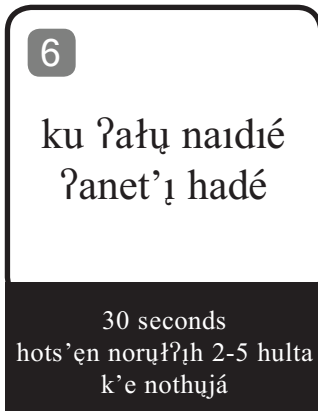

30 seconds hots'ın norıʔıh 2-5 hulta k'e nothıjá



Bedanarıta hu Nėdha k'enóıtsıı

Ku ʔėdıat'u ʔėdırı Metered-Dose Inhaler (MDI) spacer device hel bet'orıʔá ʔá?

1. Bedaharıtı hu.
2. Hıłhıs hu.
3. Ku t'a bets'ı ʔası k'ı spacer k'e narıʔá hu t'a dėnedha k'e ha ʔası k'ı t'ok'e nıtı ha nıta spacer lağhé ts'ın.
4. ku t'a ʔası begasé nıtı hoʔa spacer k'ı neghú gasé nıta ʔeyer dé hıʔaıl nedhá ʔá, nııts'ı tth'ı hadhı ch'a ha boghıłnı. Hawıjı hu. ʔėdırı naıdı tılı bekıłnı MDI hots'ı naıdı tılıʔasé k'é ʔııá bet'a naıdıe hudhı ha. Ts'ethıye nejı chu bek'etı'á hots'ın nejı 3-5 seconds hots'ın.
5. ku ghıjı tı'aghé dé, t'anıłthá nebá horená hots'ın neyı hıtó lá, łonó hots'ın hıłtá hu nejı.

Benóııı: Ku nııts'ı dııth'agh dé doʔası ııgha nejı sı.

Benóııı: ku nejı ha horená chu neyı hıtó ha dué dé, ʔėdırı t'a beye nejı sı 3 hutó 4 hots'ın hoʔası ghıjı la.

6. Ku ıııaghé ʔası naıdıé t'orıʔá ha dé, ʔėdırı 2-5 hulta k'ı k'e hanawılé lá, 30 seconds hots'ın norıʔıh bek'ech'atá hu.
7. Ku spacer k'e bedanarıta. Nedhá k'enóıtsıı.

Benóııı: ku nets'ı beyets'ejı inhaler k'ı bets'ı spacer hedı bet'anét'ı ha dué sı.

Benóııı: hok'etı'a t'a ʔerıhtı'ıs begharé nets'ı naıdıe ʔanet'ı ha bek'eyoıtı t'at'u bet'anet'ı daıı ha.

Nets'ı spacer t'at'u boghıłnı hoʔa

1. ıııa dzıraıa daneıı'u bek'enóıtsıı. Tu nedhel ye tawıta hu daııt'agh yé bek'onóıtsıı.
2. Tu bek'en noıdé hu, ıııa tedhe naréjá ha nıta.

Naidihúłta beyets'ejí Inhaler chu spacer dënenih k'e mask heł



1

Narıʔa



2

Hųłhus



3

Spacer yłttih




4

ʔıłta bek'ıłnı



5

Beye nejí chu hanéjı 5
hots'ęn

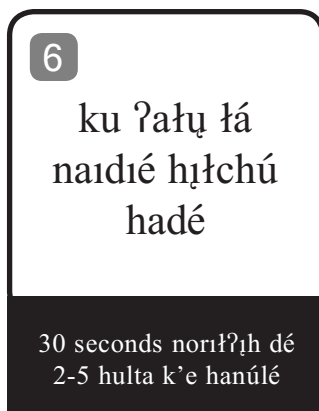

6

ku ʔałı ıá
naidıé hıłchú
hadé

30 seconds norıłʔıh dé
2-5 hulta k'e hanúlé



7

Bedanáruıta tı'aghe
dé tu nedá chu neghu
k'enołtsıł

ku ʔedłat'u ʔedırı naıdı tılı MDI bet'orıłʔá ha ʔá?

1. Bets'ı cap narıʔá.
2. Hųłhús.
3. ʔá t'ok'e dënedhá ha ʔası k'ı spacer lağhé bek'ıttihı.
4. Nenı k'e mask narıłchuth nıłts'ı hadhı ha nıłʔıh nenı k'é. T'oho nejí dé bedaháruıdeth. Naidıtılı k'é ʔıłta bek'ıłnı naıdı dałt'ır ha spacer ye.
5. Ts'ethıye ts'éjı hoʔa 10 seconds hots'ęn neyı hıto hoʔa. ku ʔıłta tó ʔası ʔá horéna dé (sekuıase chu sekuı) ʔedırı naıdı tılı ye tthęne dadjı 5-6 hots'ęn.
6. ku ʔıłághe ʔası naıdı ʔanet'ı hoʔa dé, 2-5 hulta k'e hanawúlé la, bek'ech'atá 30 seconds hots'ęn norıłʔıh.
7. bedánaruıta tı'aghe dé nedhá k'enołtsıl/tu nedá/hutó neghú k'enołtsıl.

Benólnı: nets'ı naıdıtı spacer hedı bet'áhıttı soná.

Benólnı: hok'etł'a t'a ʔerıhtł'ıs begharé nets'ı naıdei ʔanet'ı ha bek'eyołtı t'at'u bet'anet'ı dałı ha.

Nets'ı spacer t'at'u boghıłnı hoʔa

1. ʔıłta dzırafa danekt'u bek'enołtsıl. Tu nedhel ye tawutá hu dałt'aghe ye bek'onótsıl.
2. Tu bek'en nołdé hu, ʔıłta tedhe naréjı ha nıta.

Nebulizer® tutsenę hełtsí

ku ?edłat'u ?edırı Nebulizer® bet'oríłá?

1. ku ?edırı tutsenę hełtsí dek'elt'í ho?ą ha nųłłh la.
2. ?ejedheth t'ok'e dek'elt'í ho?ası dek'ųłt'ı.
3. naidí tılı bedahárųłdeth.
4. Tth'aí ye t'ok'e naidí nıdıl yé tainıł.
5. Bedanánųłdeth.
6. Tu tsenę hełtsí badaharųłdeth, naidie tutsenę ye hané ha.
7. Dėnenı ha mask ?ėdek'enųłtchuth hutó dėnedha beye nejı ha nedhá ye nų?á.
8. Naidı t'at'ere ts'ęn bet'orųłthı.
9. Tutsenę hełtsı badárųłdeth.

Ku t'at'u nets'ı Nebulizer® boghıłnı

1. Netsı denenı mask chu t'ok'e naidı hutł'ır ha tu nedhel datłagh hel bek'onoltsıl.
2. Tu ye nųtą hu ttheęę narejá hanelé.

Respimat® naıdıé hulyé




Ku ?edıat'u Respimat® bet'orıf'á ?á?

Dék'elyé:

1. Ku ?edırı naıdı tılı Respimat® huly k'ı nake ?ası dek'ely ho?á. beyets' jí chu naıdı tılı.
2. Ku bedarıta heł, t'á yutó ?ası k'ıhı t'a beghá yet'ı beyets' jí haıtı ha.
3. Naidietılı ?eja beyúta.
4. Ku t'a beyets'ejı yudagh ts'edhın nıtá hotie bek'úhı beyets'ejı hotı degar naıdı tılı beye th tá ho?á.
5. ?edırı tılı beghá yet'ı ?eja nıtá la.

Benólı: Horelyú ?ası dék'ıllá dé ?edırı beyets'ejı NANİLE ha ho?alé ?eyer t'ághé.

Respimat® naídíé hulyé

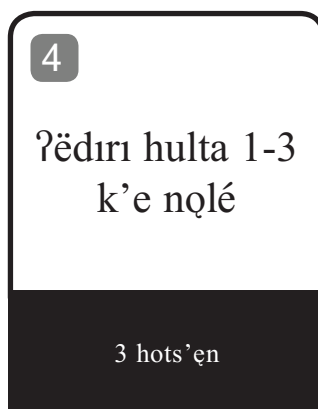

naídí hetl'ır ha:

1. t'a beyets'ejí yúdagheredhen huto lá. bek'eyaghe narútdeth t'ats'én narútdeth hots'én detl'ıs gharé "kík" (tanıısı narútdéth).
2. Bek'aíkane daharú?ı t'at'ere hots'én.
3. Ku t'a beyets'ejí nıısı ts'edhen hawulé. bek'u?nı t'a naídíé hetl'ır ha. Tu tsenę?ase lahot'ı borút'ı. Bedanárúta.
4. Ku ?édırı hulta 1-3 ke nawulé lá, 3 hulta hots'én, ?eyer dé beyets'ejí bet'áhot'ı ha.

Respimat® naidíe hulyé



1
Beye nejí naidíe yudaghé huto



2
T'a beyaghé Nqldeth "kík" hots'én



3
Ku t'ats'én bedaharí ho'á



4
Ts'éth'iyé hanéjé eth Chu horelyu hots'én



5
T'oho híjé dé ?eyí chu ?édírí naidíe K'ÍNÍ hu beríní



6
Neyí huto hu hawují



7
Bedanarú'á

ku ?édíat'u ?édírí Respimat® bet'ore'á?


1. Behaharú'á ts'én tth'u naidí tılı yudaghe huto.
2. Bek'eyaghe naruta t'a begha yet'ı k'ı "kık" dtth'agh hots'én (tanısı ts'én).
3. Bek'aıkané hódáharu'á t'ats'én bedaharí'á hots'én.
4. Ts'ethiyé hanéjé chu nejí.
5. T'ok'é dēnedha k'e nejí k'e nedhá nu'á. horelyu nedhá degharé hu'ail la. T'a naidí tılı k'ı nek'asé ts'éredhen hanélé. Ku t'oho ts'ethiyé nejí hu ?édírí bék'ıını t'a naidíe herenı ha tutilı yé.
6. ku t'a naidí tılı ye nejí sı nedhá ch'ası nıtá 10 seconds hots'én nejí huto. Hawujı.
7. Bedanarú'á.

Benóını: ku ?édírí TOP t'ats'edı k'ı – Turn Open Press – bedaharú'á bek'ıını ?á hats'edı sı yatı begharé naidí tılı daharetı há.

T'at'u ?édírí Respimat® boghı'ıını

1. ?ası nechá ho'é hıle kulı ?esqt'ele nets'ı naidí tılı hoghıını hadé bet'anét'ı t'ı'aghé dé bek'enaı'dé dé kút'á. ku t'ok'e dēnedha k'e ho'á k'ı ?edı ?ahot'ı hájé dékulı ?esqt'ehıle sı bet'a due hané hıle sı.
2. Horelyu dék'elyá dé t'ı'aghé dé, t'a beye ts'éjı ?etaılye ho'á hıle.
3. Ku?atı t'anet'e naidí tılı yé hılı sı t'ok'e hultá sı nı'ı'ıh la. Begharé t'anet'e naidí hılı k'ojá. Ku t'oho hulta k'é delk'os hájé dé naidíe godhe horııh sı. Ku horelyu naidíe bekıhıdher dé kut'a ?atı naidí hıt'ır hıle há.

Turbuhaler® naidié

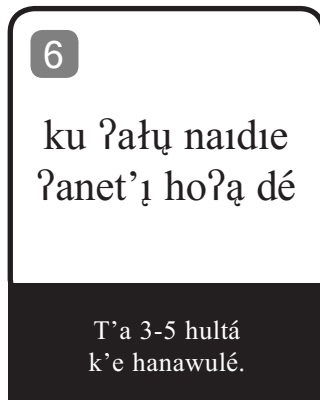

T'at'u ?ëdíri Turbuhaler® t'orí?á?

1. Yudaghé ts'ën hütó.
2. T'a k'eyaghe naiddith hıçlıhu hu bedaharı?á ?ëíts'ıts'ı ts'ën.
3. bek'eyaghé ts'ën hütó hu narıfıbatı t'ats'ën hı?á hots'ën, ?eyer dé k'ënoíddeth “k'ík” dıttı'agh hots'ën.


Benolnı: naıdı tılı hıfıhıs chu beyıshıfı hılı tth'ı ho?á.

4. Dënedha k'e ch'ası hawújı.
5. ?eyer dé naıdı tılı yudha ts'ën nıtá la nedhá ts'ën. Neghu gasé ts'ën nıtá. ?ıgha chu t'anıfıtá nel?a ts'ën nejí dënedhá k'é. Nedha hots'ı Turbuhaler® ch'ası nı?á hu 5-10 seconds hots'ën neyí hütó. Hanéjí.
6. ku 3-5 k'e hanelé nadı t'ats'ën naıdı k'ënel't'e ?anet'ı hots'ën.
7. Bedanarıddeth hu nedhá k'ënaıfıtı.

T'at'u Turbuhaler® bóghıfını

1. Tsatsılé huto yu ?a bek'e noıdé, bek'e ?ası hulı de ts'er hutó t'ok'e dënedhá k'é yaghe hots'ën. Turbuhaler® Bek'ënoqtsıfı walé sona.
2. Ku t'anélt'e naıdie hulı hulta sı nıfı?ıh.
3. Nahıyé Turbuhalers® bek'e hulta ha ?ası hulılé sı. Ku dënedhá k'e hoyaghé dëlk'os horıt'ı dé, ?ëdíri Turbuhaler® ?aíu beye 20 naıdıé bet'ahot'ı ha behgodher sı. Ku t'a dëlk'es horet'ı bek'eyaghe ts'ën hajá dé Turbuhaler® horelyu bek'ıdher sı.

Twisthaler® naidié hulyé

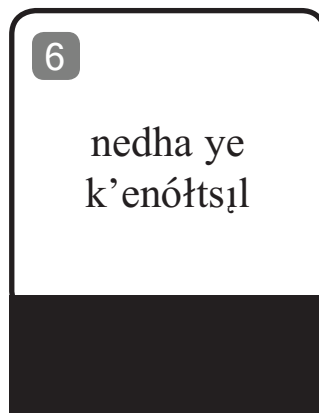

?édlat'u ?édiri Twisthaler® be'tore?á ?á?

1. Yudaghe ts'eredhen hütó t'aberedler (beyaghe) yunisi ts'én.
2. Ku t'a k'eyaghe ?asi k'i nari?deth ?étsitsi hots'én nari?á há. Ku nari?á ts'én tth'u t'a naidi hu?ta k'i ?i?aghe yuni hané ha.
3. ku dënedha k'é ch'asi hawuji la.
4. Nédhá ts'én naidi tili nütá la tthotthi ?eyer dé, nedha benaru?á hu beye ?igha neji chu nedzidhé k'et'á hots'én. ku ?eyer t'aghe dé naidi tili ?édech'asi niti hu 10 seconds hots'én neyi hütó, t'asts'én neba horená hots'én. Hanéji ?eyer t'aghé dé.
5. Ku bek'aikane bek'é nütdeh ?éts'its'én ne?deth chu bek'ihni t'ats'én k'ik d'itth'agh hots'én. ku badri?deth t'aghe yunadhe bet'ori?ah nadhi ha naidi beye huli ha.
6. Nedhá ye k'eno?tsi.

Ku t'at'u Twisthaler® boghi?ni

1. Yu chu tsatsilé ?a dënedhá k'e bek'e no?dé.
2. Twisthaler® bek'ena?tsil ho?á hilé.
3. Ku t'a naidi hu?ta k'i "01", k'e haji dé kut'a k'asjene belaghe si. Bet'aghe "01", de t'a yu?ta k'i "00" hané ha ?eyer dé hifi? hasi. Naidi tili ?olhal.